

構成部品

材 質

表面：ポリエステル 100%、裏面：ポリウレタン樹脂 100%



便座への取り付け方

① 便座のホコリなどを拭きとります


便座のホコリや水気、汚れなどをよく拭きとります。

※便座に除菌クリーナーを使用した場合は、一旦水拭きし、乾かしてからご使用ください。

(吸着力が弱くなります)

② 保護フィルムをはがします

吸着便座シートの裏面にある「OPEN」を目印に、保護フィルムを片側ずつゆっくりはがしてください。

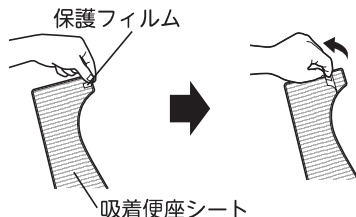

③ 吸着便座シートを便座に貼り付けます

便座後側の角に、吸着便座シートの角をぴったりと合わせてください。

その後、便座の形に沿わせるようにしてシートをしっかりと貼り付けてください。

同様の手順で、反対側にも吸着便座シートを貼り付けてください。



お手入れの方法

40℃以下のぬるま湯に中性洗剤を使って洗い、日陰干しにしてください。

※洗剤を使ってポータブルトイレをお手入れするときは吸着便座シートを外してください。

※洗濯時に柔軟剤や漂白剤を使用しないでください。

※初めて洗濯するときは、繊維が多少抜けることがあります。品質上の問題はありません。

※乾燥機を使用しないでください。

※裏面の吸着面を合わせて干さないでください。

※繰り返し洗濯してご使用いただけますが、吸着力が弱くなりましたら

お買い上げになった販売店にて、新しい吸着便座シートをお求めください。



・洗濯ネットを使用

中国製

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製造・発売元

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

・お客様から頂いたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
・個人情報情報は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索