

ポータブルトイレの導入効果と選び方



ポータブルトイレを利用すると、トイレまで移動しなくても排泄ができるので、転倒などの事故を予防することができます。また、自力での排泄が可能のため、介護者への気兼ねも少なくなり、生きる意欲や生活の質全体を高めること(QOLの向上)も期待できます。

排泄時の困りごと

- 夜間頻尿・切迫性尿失禁・便秘等による排泄障害で、トイレまで間に合わなかった。
- 腰痛・筋力低下・変形性膝関節症・リウマチ・骨折等により、トイレまでの歩行または一定高さの洋式便器での立ち座りが困難であった。
- 脳血管障害や脊椎損傷等の麻痺によりトイレまでの歩行が困難であった。



ポータブルトイレを導入するとこんな効果があります!



ポータブルトイレを選ぶときのポイント

今の状況だけでなく、将来的な使いやすさも考えてポータブルトイレを選びましょう。

1 樹脂製(プラスチック製)か家具調で選ぶ

樹脂製(プラスチック製)

軽くて持ち運びやすい!

丸洗いができるからお手入れが簡単。
ニオイが付きにくい。



家具調

お部屋になじむ
家具のようなデザイン!
重量があり安定感がある。



2 設置状況や身体状況に応じて、サイズやひじ掛けのタイプで選ぶ

座面の高さ

座った時にしっかり足裏が床につく

座面内寸の幅

姿勢保持と動きやすさの両立

ひじ掛け

固定タイプ・はねあげタイプ

3 座り心地(便座)で選ぶ

標準便座

抗菌加工を施したプラスチック便座

※一部製品に限る



ソフト便座

お尻のやせた方、長時間着座時に最適
水が染み込まないので丸洗いが可能



長時間座っても大丈夫




ヒヤッとしない素材

暖房便座

心臓疾患の方、高血圧の方、腰痛の方に

冬場など、瞬間的に
体温が奪われて
血圧が上昇

暖房便座なら
あたたか

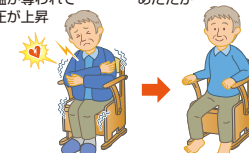

着座時の冷たさによる
ショックを軽減します。



4 機能で選ぶ

快適脱臭

Point!

- ・お部屋にニオイが染みつかない
- ・ニオイを気にせず遠慮無く排泄できる
- ・脱臭装置は自動でスイッチON

1分間に
ドラム缶1個分の
強力吸引
約150ℓ/
分以上

強力脱臭
99%
カット



温水洗浄

毎日入浴できない方でも、おしりや陰部を清潔に保ち、QOL（生活の質）を高めるために温水シャワーが有効です。

＼こんな方におすすめです／

- 拭き取る動作が難しい
- 頻尿（女性）
- 便がゆるい（下痢が多い）
- 便秘気味

シャワーノズルの位置を調整できる

シャワビタ機能



左右3段階



前後5段階

自動ラップ機能

排泄物をフィルムでラッピング。後処理の負担を軽減します。

バケツ洗浄不要

ニオイを密封



ポータブルトイレ

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

ソフト便座、暖房便座、脱臭機能付きタイプも選べます。



ポータブルトイレ FX-30 シリーズ



移乗・排泄・片付け、3つを支えるマルチサポートトイレ

使いやすいひじ掛け

- ワンタッチ昇降
- ひじ掛け0cm設定



便座高さワンタッチ調節

固定ナットをゆるめて

調節ボタンを押すだけ



家具調トイレ セレクトSシリーズ



ひじ掛け ノーマル

ひじ掛け はねあげ

使いやすいさとお求めやすさを兼ね備えた新モデル


シンプルな高さ調節



片手で紙が切れる



コンパクトでゆったり座れる

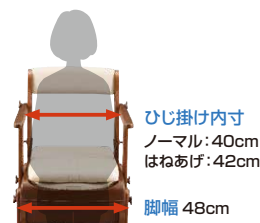

ひじ掛け内寸
ノーマル：40cm
はねあげ：42cm
脚幅 48cm

アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

HP



Instagram



YouTube



X

