

浴室での姿勢保持改善に！ シャワーベンチの選び方



身体を洗うときの姿勢が不安定な場合や風呂いすからの立ち座りが難しい場合、シャワーベンチを導入することで、姿勢を保持したり、立ち上がりを楽に行えるようになります。

シャワーベンチが必要な状況と導入による効果

シャワーベンチ（入浴用いす）

立ち座りの負担を軽減し、
座った時の姿勢をサポートします。


こんな身体状況の方におすすめ！



- 立ち座りが不安定、または困難な方
(変形性膝関節症、半身麻痺、骨折、パーキンソン病など)



- 座った姿勢が不安定な方

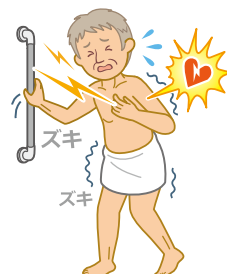

- 心臓、血管系の疾患があるため、負担をかけずに楽に立ち座りしたい方

シャワーベンチの使い方

自立(介助なし)

シャワーや石鹸、タオルなど、必要なものを座った状態で手が届く範囲に置いておくことで安心して利用できます。

Point!

座面はひざ下の寸法を参考にして、立ち座りのしやすい高さに調整しましょう。



介助あり

シャワーベンチの周囲は、介助しやすいように十分なスペースを確保しておく必要があります。

Point!

利用者が安定した姿勢でしっかり座れているか、確認することが大切です。



選ぶ時のチェックポイント

1 身体に合うか




① 座面の高さ
ひざ下の高さに調節できる

② ひじ掛け内寸
姿勢保持のしやすさと、座った時のゆとり
のバランスがいい

2 浴室に収まるか

扉を開けるとときに邪魔にならない

移動スペースが確保できるか

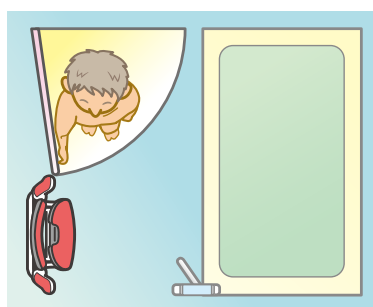

折りたたみシャワーベンチAシリーズ

業界最軽量の3.5kgで持ち運びやすい

とっても軽いので片手での持ち運びが楽らく。

折りたたみレバーを持って



背もたれを持って



製品幅はコンパクトなのにゆったり座れる




どこを握っても柔らかいひじ掛け

ひじ掛け全体をクッション材で覆うことで、どこを触ってもやわらかく握りやすい。



折りたたみレバーで簡単ワンタッチ開閉

輪っか形状の折りたたみレバーを持ち上げるだけで簡単に折りたたみができます。握る動作が苦手な関節疾患の方でも操作ができて使いやすいレバーです。

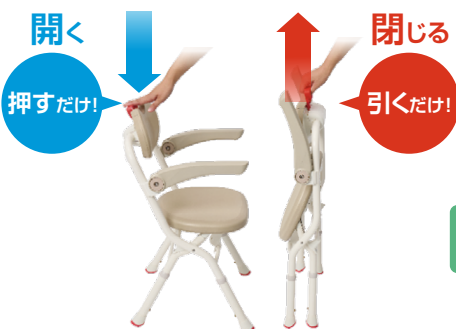

自分でもできそう!



握らず持ち上げる



握って持ち上げる



つまづき防止

脚ゴム先端にアクセントカラーを入れることでつまづきを防止。



折りたたみシャワーベンチAシリーズ ラインナップ



アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

HP



Instagram



YouTube



X

