

# 安<sup>あんじゅ</sup>寿

「やりたい」を  
「できる」に変えよう。

## ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート

楽<sup>らく</sup>つけ  
シリーズ

ユニットバス対応浴槽手すりに  
“ショート”タイプを追加!!

### 低い浴槽壁に 取り付けできる


エプロン式浴槽に  
取り付けできる

洗い場を  
ひろびろ使える

30.5cm  
~  
44.5cm  
に対応


### 防カビ<sup>ダブル</sup>

こんな浴槽に取り付けできる  
ようになりました!

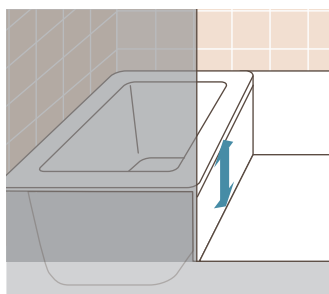


ハーフユニットバス※で  
洗い場側の浴槽壁が低い浴槽

※浴槽、洗い場と壁の下部分がユニットバスで、  
天井と壁の上部分が在来工法の浴槽。

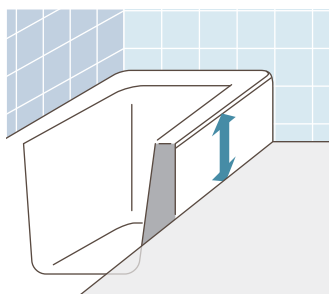

埋め込み式浴槽で  
洗い場側の浴槽壁が低い

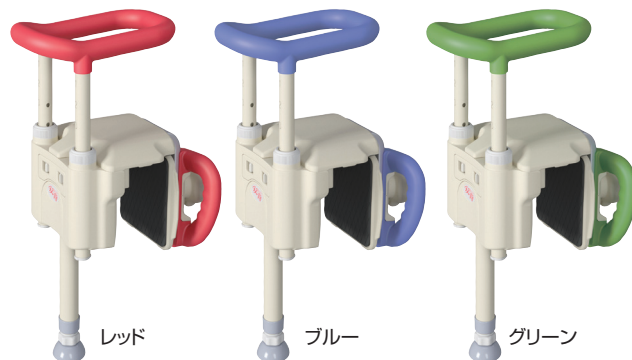

ARONKASEI CO., LTD.

## 省スペース設計

洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。

13.5cm

グリップの出っ張りが小さく  
介助動作の邪魔に  
なりません。



8cm

脚の出っ張りが小さく  
利用者の足をひっかけにく  
く安心です。



洗い場側

浴槽内

## 取り付けできる浴槽

浴槽の素材…FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽

浴槽の  
サイズ

4.5cm~13cm

リムの段差

1.5cm  
以下

リムの高さ

2.7cm  
以上

30.5cm~44.5cm


10°以下

浴槽内

洗い場側

〔商品寸法図〕

(単位:cm)

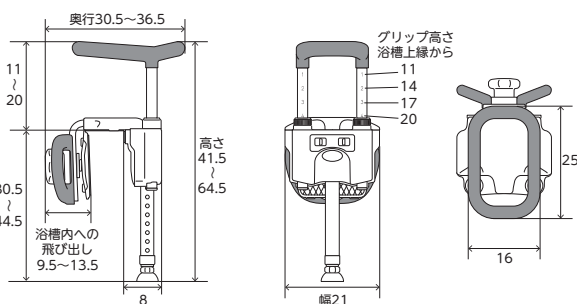


## 調節もカンタン

グリップの高さを、  
カンタンに調節可能。

つまみをつまんで、グリップを上下にス  
ライドさせるだけ。工具も不要で、カン  
タンに高さを調節できます。

工具  
不要

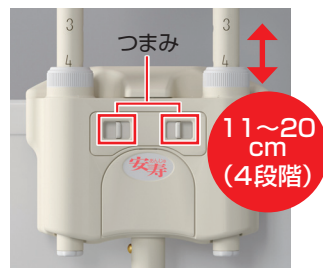


浴槽の高さに応じて  
脚の長さの調節もカンタン。

脚パイプはプッシュボタンで簡単調節。脚ゴムはア  
ジャスター付で床にしっかり突っ張り、安定性を向上  
させます。


工具  
不要

アジャスター付の脚ゴムは  
手でカンタンに調節できます。

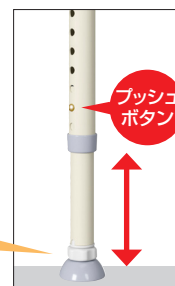

浴槽の幅に応じた  
幅調節もカンタン。

フレーム抜け止めネジで、本体を分離せず  
に幅調節できます。

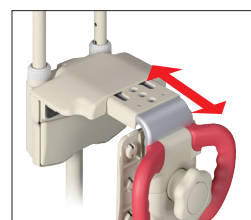

ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB ショート

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 価 格   | 41,000円(税抜)                                                                 |
| 商品コード | [レッド] 536-640<br>[ブルー] 536-641<br>[グリーン] 536-642                            |
| 商品サイズ | 幅21×奥行30.5~36.5×高さ41.5~64.5cm<br>グリップ高さ(浴槽上縁から)11・14・17・20cm                |
| 商品重量  | 約4.4kg                                                                      |
| 材 質   | [カバー]ポリプロピレン<br>[グリップ支柱]ステンレス<br>※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)<br>[フレーム]アルミニウム     |
| 梱包入数  | 2                                                                           |
| J A N | [レッド] 49-70210-01378-6<br>[ブルー] 49-70210-01379-3<br>[グリーン] 49-70210-01380-9 |

※付属品：六角レンチ

最大使用者体重 80kg

特定福祉用具／特定介護予防福祉用具

**SIAA**  
防カビ加工

# アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報情報は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



Instagram



YouTube



X



- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■ お問い合わせは…