

昇降動作にかかせない木製玄関台との組み合わせ

木製玄関台と上がりかまち用手すりを組み合わせて使用すると、段差の昇降動作を安定した姿勢で安心して行うことができます。

■木製玄関台・上がりかまち用手すり推奨組み合わせ

段差高さ	木製玄関台	上がりかまち用手すり
15cm以下	—	140、300、650シリーズ
25cm	木製玄関台1段 奥行30cm	650シリーズ
	木製玄関台1段 奥行40cm	950シリーズ



上がりかまち用手すり950と
木製玄関台1段奥行40cm



上がりかまち用手すり650のみ

式台がある玄関にも対応

設置例①（土間にスライド脚を設置）




土間に
スライド脚
を設置

■土間にスライド脚を設置する場合の設置可能寸法

品名	寸法A		寸法B	
	L型の場合	F型の場合	L型の場合	F型の場合
K-140	—	—	6～45cm	0～45cm
KM-300	21cm未満	21cm未満		
K-650	32cm未満	32cm未満		
KM-650				
S-650				
SM-650				
S-950	59cm未満	15cm以上 59cm未満		
SM-950				

※式台の幅が設置可能寸法から外れている場合は取り付けできません。

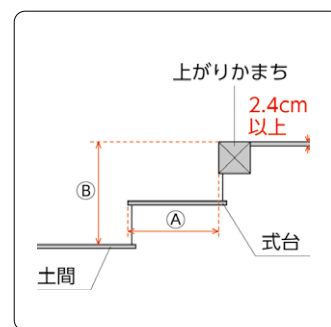

設置例②（式台にスライド脚を設置）




式台に
スライド脚
を設置

■式台にスライド脚を設置する場合の設置可能寸法

品名	寸法A		寸法B	
	L型の場合	F型の場合	L型の場合	F型の場合
K-140	12cm以上	12cm以上	6～45cm	0～45cm
KM-300	27cm以上	21cm以上		
K-650	38cm以上	21cm以上		
KM-650				
S-650				
SM-650	38cm以上	21cm以上		
S-950				
SM-950				

※S-950・SM-950は、式台には設置できません。

※取り付け位置をずらして設置する場合は、式台の端から2cm奥にスライド脚を設置してください。

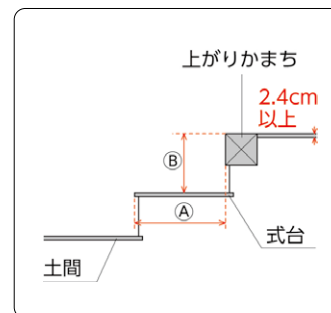

上がりかまち用手すりの名称について

K=手すり高さ固定、S=手すり高さ調節可能（スライド）、M=手すり部が木製

	K	S	KM	SM
高さ 手すり	固定	調節可能	固定	調節可能
材質 手すり部	スチール または、 スチール (エラストマー被覆)	スチール (エラストマー被覆)	木製	木製

取り付け可能な上がりかまち

- 上がりかまちの形状が四角形状であること
- 段差が6～45cmであること
- 上がりかまちの幅が4cm以上で、且つ
せいが6cm以上であること

※廊下部分の板厚が2.4cm以上であること（Fの場合）

■取り付け可能寸法

