

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

ご好評につきサイズラインナップ追加!

スッと持ち上げ、 サッと水キレ

軽くて持ちやすいから
出し入れ楽らく



あしびたっ シリーズ		高さ8～12cm	高さ12～20cm	高さ16～26cm	高さ20～30cm
標準タイプ 両足が収まり、安心感のある 天面広さが必要な方に  浴槽底幅41cm以上					
ジャストタイプ 底面のR形状が大きい浴槽に  浴槽底幅36cm～41cm			NEW	NEW	NEW
ミニタイプ 底面が狭い浴槽に  浴槽底幅33cm～36cm			従来品	従来品	

ただ軽いだけ じゃない!

水の抵抗の少なさによる

「実使用上での「本当の」軽さ」
を目指しました。

実使用上での
「本当の」軽さ
を引き出す

3つのポイント

1 浴槽台※で 最軽量クラス 2.0kg~



今までよりも軽量になった
ので高齢者や女性でも持ち
上げが楽になり、出し入れ
の負担が軽減します。

※自重で沈めるタイプ

2 楽に取り出しできる持ち手



握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめます。十分な持ち手がないと、取り出しの助けになりません。大きさや角度にこだわりました。

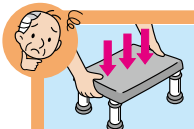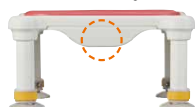

両手で持ち上げると水の抵抗が大きく重い。



水の抵抗を小さくするためにななめにする持ちにくくすべりやすい。




3 水切れのよい貫通構

脚(支柱)の真上にも穴があり水切れがよいだけでなく、持ち上げる際に有効



浴槽から取り出したときの水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくするために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。

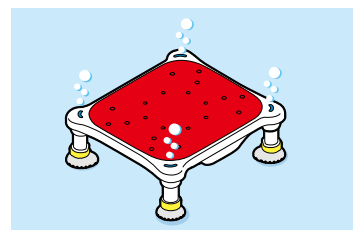

持ち手があるので、片手で楽に取り出しができます。

豊富なラインナップ

1.用途にあわせて選べる座面タイプ

すべり止めシートタイプ



すべりにくい、エラストマーで加工した天板です。



踏み台として使用する際に安心

ソフトクッションタイプ




やわらかい、EVAクッションを採用しています。
※天板から取り外し可能



ソフトクッションがおしりにやさしい


2.しっかりと足が収まる天板サイズ

標準

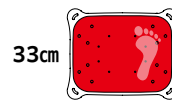

41cm

ジャスト

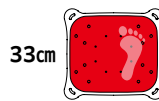

36cm

ミニ






33cm

製品の奥行きが27cm以上あるので、足がすっぽり収まり、安心して踏み込みができます。また浴槽台のふちに足をのせるとバランスを崩してしまいますが、天板をツートンカラーにしているので、白枠内に足を置くようにすれば安心して使用できます。

ツートンカラーで踏み込み位置がわかりやすい

3.用途やお風呂の深さに合わせられる幅広い高さ調節

※最大の高さで比較

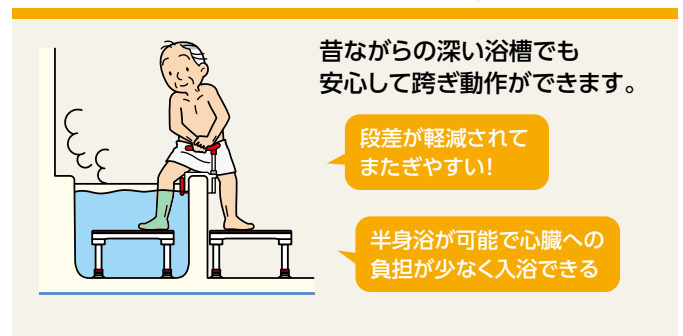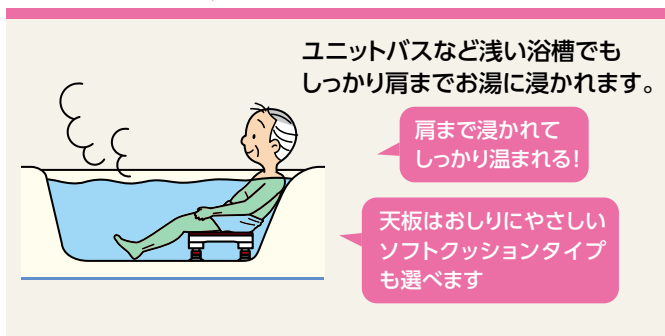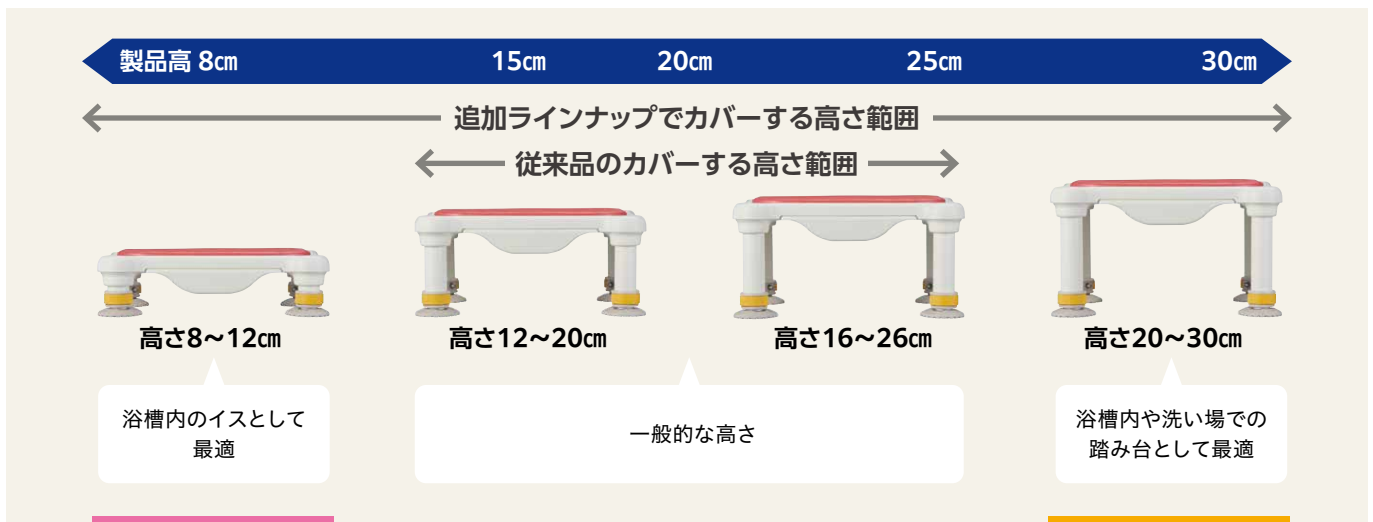

簡単調節方法

1か所で調節できる

調節部分の固定箇所が1か所のため、少ない作業数で高さ調節ができます。また、調整ピンが黄色で見やすく失くしません。



D型パイプ構造

D形状のパイプで上下方向のみに動きを制限でき、パイプをスライドしたときに高さ調節の穴位置がわかりやすい形状です。



楽しくお手入れ

着脱しやすい天板

天板を外しやすくするため天板と本体の間に指かけ部分を設けました。
※短辺側



製品の裏面の凹凸が少なく洗いやすい

速乾構造

脚部の貫通構造パイプ内の水切れ、風通しが良い貫通構造です。

立てかけ保管構造
本体を安定して立てかけて置くことができ、カビやすい部品も乾かしやすくしています。



軽量浴槽台

天板 サイズ	天板 タイプ	品名	カラー	商品 コード	商品サイズ	商品 重量	材質	梱包 入数	JAN	TAIS	価格
標準	すべり止め シート	標準 12-20	レッド ブルー グリーン	536-525 536-526 536-527	幅41×奥行33× 高さ12~20cm	2.4kg	(天板) ポリプロピレン ^{※1} (ソフトクッション) EVA樹脂 ^{※2} (本体・スライド支柱) アルミニウム (脚ゴム) エラストマー ^{※3} ／ ポリプロピレン ^{※1} すべり止めシート表面は エラストマー ^{※2} ソフトタイプのみです。 EVA樹脂=エチレン酢酸 ビニル共重合樹脂を表し ています ^{※3} 防カビ加工	2	033456 033463 033470	000618	24,000円 (税抜)
		標準 16-26	レッド ブルー グリーン	536-528 536-529 536-530	幅41×奥行33× 高さ16~26cm	2.5kg		2	033487 033494 033500	000619	24,000円 (税抜)
		標準 20-30	レッド ブルー グリーン	536-531 536-532 536-533	幅41×奥行33× 高さ20~30cm	2.6kg		2	033517 033524 033531	000620	24,000円 (税抜)
	ソフト クッション	標準ソフト 12-20	レッド ブルー グリーン	536-535 536-536 536-537	幅41×奥行33× 高さ12~20cm	2.7kg		2	033548 033555 033562	000621	26,000円 (税抜)
		標準ソフト 16-26	レッド ブルー グリーン	536-538 536-539 536-540	幅41×奥行33× 高さ16~26cm	2.8kg		2	033579 033586 033593	000622	26,000円 (税抜)
		標準ソフト 20-30	レッド ブルー グリーン	536-541 536-542 536-543	幅41×奥行33× 高さ20~30cm	2.9kg		2	033609 033616 033623	000623	26,000円 (税抜)
ジャスト	すべり止め シート	ジャスト 8-12	レッド ブルー グリーン	536-588 536-589 536-590	幅36×奥行33× 高さ8~12cm	2.2kg	(天板) ポリプロピレン ^{※1} (ソフトクッション) EVA樹脂 ^{※2} (本体・スライド支柱) アルミニウム (脚ゴム) エラストマー ^{※3} ／ ポリプロピレン ^{※1} すべり止めシート表面は エラストマー ^{※2} ソフトタイプのみです。 EVA樹脂=エチレン酢酸 ビニル共重合樹脂を表し ています ^{※3} 防カビ加工	2	033630 033647 033654	000614	24,000円 (税抜)
		ジャスト 12-20	レッド ブルー グリーン	536-550 536-551 536-552	幅36×奥行33× 高さ12~20cm	2.3kg		2	012741 012758 012772	000560	24,000円 (税抜)
		ジャスト 16-26	レッド ブルー グリーン	536-555 536-556 536-557	幅36×奥行33× 高さ16~26cm	2.4kg		2	012789 012796 012802	000561	24,000円 (税抜)
		ジャスト 20-30	レッド ブルー グリーン	536-591 536-592 536-593	幅36×奥行33× 高さ20~30cm	2.5kg		2	033661 033678 033685	000615	24,000円 (税抜)
	ソフト クッション	ジャスト ソフト 8-12	レッド ブルー グリーン	536-594 536-595 536-596	幅36×奥行33× 高さ8~12cm	2.5kg		2	033692 033708 033715	000616	26,000円 (税抜)
		ジャスト ソフト 12-20	レッド ブルー グリーン	536-560 536-561 536-562	幅36×奥行33× 高さ12~20cm	2.5kg		2	012819 012826 012833	000562	26,000円 (税抜)
		ジャスト ソフト 16-26	レッド ブルー グリーン	536-565 536-566 536-567	幅36×奥行33× 高さ16~26cm	2.6kg		2	012840 012857 012864	000563	26,000円 (税抜)
		ジャスト ソフト 20-30	レッド ブルー グリーン	536-597 536-598 536-599	幅36×奥行33× 高さ20~30cm	2.8kg		2	033722 033739 033746	000617	26,000円 (税抜)
ミニ	すべり止め シート	ミニ 12-20	レッド ブルー グリーン	536-570 536-571 536-572	幅33×奥行27× 高さ12~20cm	2.0kg	(天板) ポリプロピレン ^{※1} (ソフトクッション) EVA樹脂 ^{※2} (本体・スライド支柱) アルミニウム (脚ゴム) エラストマー ^{※3} ／ ポリプロピレン ^{※1} すべり止めシート表面は エラストマー ^{※2} ソフトタイプのみです。 EVA樹脂=エチレン酢酸 ビニル共重合樹脂を表し ています ^{※3} 防カビ加工	2	012871 012888 012895	000564	24,000円 (税抜)
		ミニ 16-26	レッド ブルー グリーン	536-575 536-576 536-577	幅33×奥行27× 高さ16~26cm	2.1kg		2	012901 012918 012925	000565	24,000円 (税抜)
	ソフト クッション	ミニソフト 12-20	レッド ブルー グリーン	536-580 536-581 536-582	幅33×奥行27× 高さ12~20cm	2.3kg		2	012932 012963 012970	000566	26,000円 (税抜)
		ミニソフト 16-26	レッド ブルー グリーン	536-585 536-586 536-587	幅33×奥行27× 高さ16~26cm	2.4kg		2	013007 013014 013038	000567	26,000円 (税抜)

JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は
共通です。
TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。



浴槽内・
洗い場兼用

組立
完成品

最大使用者体重
100kg

特定福祉用具／
特定介護予防福祉用具

アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報 は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。



- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…