


「やりたい」を  
「できる」に変えよう。

新しいアットグリップは従来よりも少ない部材で  
設置可能な環境が増えました!



最大  
140cm  
手すり

4枚プレート  
設置可能

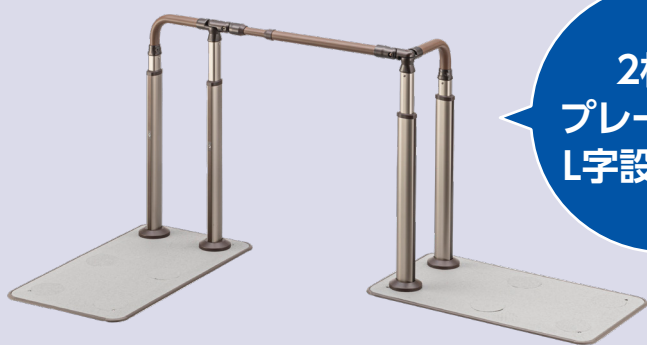

2枚の  
プレートでも  
L字設置可能



高級感溢れるエクステリアデザイン

ご利用者の貸与負担、設置労力の軽減に

住宅改修にはないレンタル品のメリット

工事不要


導入まで時間が  
かからない

取り外し簡単

# 手すり(ATTOGRIP)

## 最大140cmの伸縮手すりで 構成部材の削減

140cm手すりを使用することで支柱が3本から2本に！

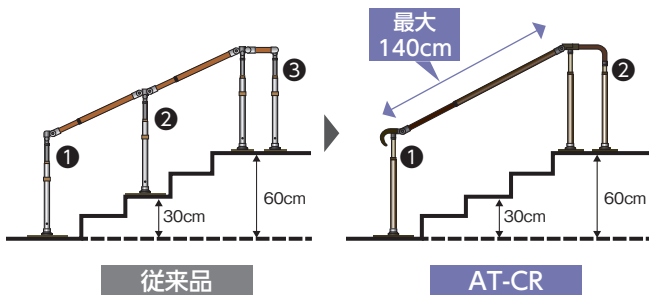


部材が削減されることで…

- 利用者の貸与負担の軽減
- 組み立て工数の削減、設置時間の短縮


につながります！

## 手にしっかりフィット 握りやすい楕円形状の手すり

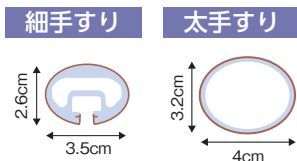

## 組み合わせ部材が増えて 設置可能な場所も増えました


最大4枚まで  
プレートを設置できる  
ようになりました。

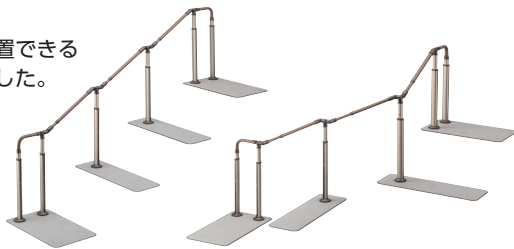

2枚プレートでも  
L字に設置が可能に  
なりました。



プレートの中央にも  
支柱を取り付けることが  
できるようになりました。

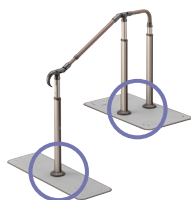

## 付着したウイルスを減少させる 抗ウイルス加工の手すり

軒先や玄関周りのレンタル手すりでも初採用！  
SIAA抗ウイルス加工準拠、軒先や玄関周りで少量の  
雨や太陽光が当たっても効果を発揮します。  
表面を掃除しても効果は持続します。



製品上の特定ウイルスの  
数を減少させます

有機合成系・練込  
手すり持ち手部分  
JP0612240A0001R

SIAAマークは ISO 21702 法により評価された  
結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドライン  
で品質管理・情報公開された製品に表示され  
ています。

⚠ 注意事項

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的  
とするものではありません
- SIAA の安全性基準に適合しています

## 手すり高さは75～90cm 7段階調節ができるようになりました



7段階調節で利用者の体格に  
合った高さを選べます。



調節はボルトで締めるだけ。

## 雨の日でも滑りにくい ベースプレート



滑りにくく、汚れも落ちやすい表  
面になっています。

## プレートのガタツキを防止する ゴム付きアジャスター



ゴム付きアジャスターでよりガ  
タツキを防止できるようになり  
ました。



アジャスターの調節はプレート  
の上から行えます。

## 設置事例

### Case 1

入浴の着替えの際に姿勢が不安定なので、支える手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-240

#### Point

築20年のマンション。  
浴室前の立位補助として設置。



### Case 2

ベランダに出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E800-N2

#### Point

築10年の戸建。  
段差が10cmあり、  
出入り動作補助として設置。



### Case 3

外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E2800-N-S-N

#### Point

築35年の戸建。  
2段かまちで玄関幅3m  
ほどの玄関土間に設置。



### Case 4

外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E3600-N-S2-N

#### Point

築20年の戸建。  
階段8段の歩行補助  
として設置。



### Case 5

外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E3000-N-S2-N

#### Point

築18年の戸建。  
駐車場までの歩行補助  
として設置。



## ラインナップ



単体タイプ



標準タイプ  
(N2)



階段タイプ  
(S-N)



3枚プレートタイプ  
(N-S-N)



3枚プレートタイプ  
(S2-N)



4枚プレートタイプ  
(N-S2-N)

福祉用具貸与  
介護予防福祉用具貸与対象品

最大使用者体重 100kg

## 構成部品

| 部品名称         | AT-CR ベースプレート N        | AT-CR ベースプレート S        | AT-CR 曲げ支柱セット          |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 商品コード        | 530-000                | 530-001                | 530-002                |
| JAN(4970210) | 035108                 | 035115                 | 035122                 |
| 希望小売価格       | 66,000 円 (税込 72,600 円) | 63,000 円 (税込 69,300 円) | 47,000 円 (税込 51,700 円) |
| 重量           | 15.7kg                 | 10.8kg                 | 3.7kg                  |
| イメージ         |                        |                        |                        |
| 部品名称         | AT-CR 先端支柱セット          | AT-CR 中間支柱セット          | AT-CR-240 支柱セット        |
| 商品コード        | 530-003                | 530-004                | 530-005                |
| JAN(4970210) | 035139                 | 035146                 | 035153                 |
| 希望小売価格       | 32,000 円 (税込 35,200 円) | 30,000 円 (税込 33,000 円) | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
| 重量           | 2.2kg                  | 2.0kg                  | 3.4kg                  |
| イメージ         |                        |                        |                        |
| 部品名称         | AT-CR-E800 手すりセット      | AT-CR-E1050 手すりセット     | AT-CR-E1400 手すりセット     |
| 商品コード        | 530-006                | 530-007                | 530-008                |
| JAN(4970210) | 035160                 | 035177                 | 035184                 |
| 希望小売価格       | 31,000 円 (税込 34,100 円) | 33,000 円 (税込 36,300 円) | 35,000 円 (税込 38,500 円) |
| 重量           | 0.9kg                  | 1.2kg                  | 1.6kg                  |
| イメージ         |                        |                        |                        |

## 構成一覧表


|                 |                     |         |        |                      |                      | 商品コード                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------|---------------------|---------|--------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     |         |        |                      |                      | 530-000                                                                            | 530-001                                                                             | 530-002                                                                             | 530-003                                                                             | 530-004                                                                             | 530-005                                                                             | 530-006                                                                             | 530-007                                                                             | 530-008                                                                             |
|                 |                     |         |        |                      |                      | A・T・C・R<br>ベースプレートN                                                                | A・T・C・R<br>ベースプレートS                                                                 | A・T・C・R<br>曲げ支柱セット                                                                  | A・T・C・R<br>先端支柱セット                                                                  | A・T・C・R<br>中間支柱セット                                                                  | A・T・C・R<br>支柱セット<br>240                                                             | A・T・C・R・E800<br>手すりセット                                                              | A・T・C・R・E1050<br>手すりセット                                                             | A・T・C・R・E1400<br>手すりセット                                                             |
| セットタイプ          | セット製品名称             | 商品コード   | JANコード | TAISコード              | 価格                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2              | AT-CR-240           | 870-200 | 035191 | 000631               | 116,000円(税込127,600円) | 1                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-240T          | 870-201 | 035207 | 000632               | 166,000円(税込182,600円) | 1                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E800-N2       | 870-202 | 035221 | 000633               | 257,000円(税込282,700円) | 2                                                                                  |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E800T-N2      | 870-203 | 035238 | 000634               | 382,000円(税込420,200円) | 2                                                                                  |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1050-N2      | 870-204 | 035252 | 000635               | 259,000円(税込284,900円) | 2                                                                                  |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1050T-N2     | 870-205 | 035269 | 000636               | 386,000円(税込424,600円) | 2                                                                                  |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1400-N2      | 870-206 | 035412 | 000637               | 261,000円(税込287,100円) | 2                                                                                  |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   |
| AT-CR-E1400T-N2 | 870-207             | 035429  | 000638 | 390,000円(税込429,000円) | 2                    |                                                                                    | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |
| S-N             | AT-CR-E800-S-N      | 870-208 | 035887 | 000639               | 239,000円(税込262,900円) | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E800T-S-N     | 870-209 | 035894 | 000640               | 349,000円(税込383,900円) | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1050-S-N     | 870-210 | 035900 | 000641               | 241,000円(税込265,100円) | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1050T-S-N    | 870-211 | 035917 | 000642               | 353,000円(税込388,300円) | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1400-S-N     | 870-212 | 035924 | 000643               | 243,000円(税込267,300円) | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E1400T-S-N    | 870-213 | 035931 | 000644               | 357,000円(税込392,700円) | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |
| N-S-N           | AT-CR-E1600-N-S-N   | 870-214 | 035948 | 000645               | 381,000円(税込419,100円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1600T-N-S-N  | 870-215 | 035955 | 000646               | 567,000円(税込623,700円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1850-N-S-N   | 870-216 | 036150 | 000647               | 383,000円(税込421,300円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1850T-N-S-N  | 870-217 | 036167 | 000648               | 571,000円(税込628,100円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2200-N-S-N   | 870-218 | 036174 | 000649               | 385,000円(税込423,500円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2200T-N-S-N  | 870-219 | 036181 | 000650               | 575,000円(税込632,500円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2100-N-S-N   | 870-220 | 036198 | 000651               | 385,000円(税込423,500円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2100T-N-S-N  | 870-221 | 036310 | 000652               | 575,000円(税込632,500円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2450-N-S-N   | 870-222 | 036327 | 000653               | 387,000円(税込425,700円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2450T-N-S-N  | 870-223 | 036334 | 000654               | 579,000円(税込636,900円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
| S2-N            | AT-CR-E2800-N-S-N   | 870-224 | 036426 | 000655               | 389,000円(税込427,900円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2800T-N-S-N  | 870-225 | 036464 | 000656               | 583,000円(税込641,300円) | 2                                                                                  | 1                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4                                                                                   |
|                 | AT-CR-E1600-S2-N    | 870-226 | 036570 | 000657               | 363,000円(税込399,300円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1600T-S2-N   | 870-227 | 036587 | 000658               | 534,000円(税込587,400円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1850-S2-N    | 870-228 | 036594 | 000659               | 365,000円(税込401,500円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E1850T-S2-N   | 870-229 | 036600 | 000660               | 538,000円(税込591,800円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2200-S2-N    | 870-230 | 036617 | 000661               | 367,000円(税込403,700円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2200T-S2-N   | 870-231 | 037423 | 000662               | 542,000円(税込596,200円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2100-S2-N    | 870-232 | 038710 | 000663               | 367,000円(税込403,700円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2100T-S2-N   | 870-233 | 038727 | 000664               | 542,000円(税込596,200円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |
| N-S2-N          | AT-CR-E2450-S2-N    | 870-234 | 038734 | 000665               | 369,000円(税込405,900円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2450T-S2-N   | 870-235 | 038741 | 000666               | 546,000円(税込600,600円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2800-S2-N    | 870-236 | 038758 | 000667               | 371,000円(税込408,100円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2800T-S2-N   | 870-237 | 038765 | 000668               | 550,000円(税込605,000円) | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2400-N-S2-N  | 870-238 | 038772 | 000669               | 505,000円(税込555,500円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2400T-N-S2-N | 870-239 | 038901 | 000670               | 752,000円(税込827,200円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 6                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2650-N-S2-N  | 870-240 | 038994 | 000671               | 507,000円(税込557,700円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2650T-N-S2-N | 870-241 | 039007 | 000672               | 756,000円(税込831,600円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E3000-N-S2-N  | 870-242 | 039014 | 000673               | 509,000円(税込559,900円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3000T-N-S2-N | 870-243 | 039021 | 000674               | 760,000円(税込836,000円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E2900-N-S2-N  | 870-244 | 039038 | 000675               | 509,000円(税込559,900円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E2900T-N-S2-N | 870-245 | 039045 | 000676               | 760,000円(税込836,000円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E3250-N-S2-N  | 870-246 | 039052 | 000677               | 511,000円(税込562,100円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3250T-N-S2-N | 870-247 | 039069 | 000678               | 764,000円(税込840,400円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3600-N-S2-N  | 870-248 | 039076 | 000679               | 513,000円(税込564,300円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3600T-N-S2-N | 870-249 | 039083 | 000680               | 768,000円(税込844,800円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3150-N-S2-N  | 870-250 | 039335 | 000681               | 511,000円(税込562,100円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 3                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E3150T-N-S2-N | 870-251 | 039342 | 000682               | 764,000円(税込840,400円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 6                                                                                   |                                                                                     |
|                 | AT-CR-E3500-N-S2-N  | 870-252 | 039359 | 000683               | 513,000円(税込564,300円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   | 1                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3500T-N-S2-N | 870-253 | 039366 | 000684               | 768,000円(税込844,800円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 4                                                                                   | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3850-N-S2-N  | 870-254 | 039373 | 000685               | 515,000円(税込566,500円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
|                 | AT-CR-E3850T-N-S2-N | 870-255 | 039427 | 000686               | 772,000円(税込849,200円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2                                                                                   | 4                                                                                   |
|                 | AT-CR-E4200-N-S2-N  | 870-256 | 039434 | 000687               | 517,000円(税込568,700円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3                                                                                   |
|                 | AT-CR-E4200T-N-S2-N | 870-257 | 039441 | 000688               | 776,000円(税込853,600円) | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6                                                                                   |

# 設置条件

## N2タイプ


## S-Nタイプ

### ●通路などに設置する場合

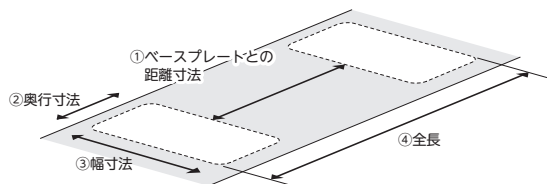


### ●段差に設置する場合

※ N2タイプ

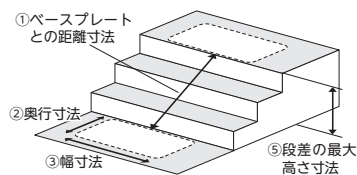

※ S-Nタイプ

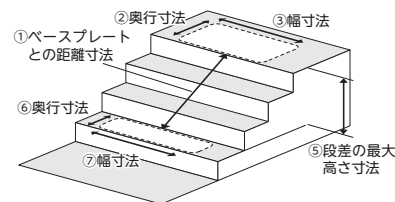

|                | N2タイプ                                                            | S-Nタイプ                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ①ベースプレートとの距離寸法 | (E800) 44～59cm目安<br>(E1050) 59～84cm目安<br>(E1400) 84～119cm目安      | (E800) 40～55cm目安<br>(E1050) 55～80cm目安<br>(E1400) 80～115cm目安      |
| ②奥行寸法          | 45cm以上                                                           |                                                                  |
| ③幅寸法           | 80cm以上                                                           |                                                                  |
| ④全長            | (E800) 135～150cm以上<br>(E1050) 150～175cm以上<br>(E1400) 175～210cm以上 | (E800) 115～130cm以上<br>(E1050) 130～155cm以上<br>(E1400) 155～190cm以上 |
| ⑤段差の最大高さ寸法     | (E800) 30cm以下<br>(E1050) 45cm以下<br>(E1400) 60cm以下                |                                                                  |
| ⑥奥行寸法          |                                                                  | 30cm以上                                                           |
| ⑦幅寸法           |                                                                  | 94cm以上                                                           |


※両側手すり(E000T)の場合も同様

※S-Nタイプは、②、③と⑥、⑦の位置が逆でも可


## N-S-Nタイプ

## S2-Nタイプ

### ●通路などに設置する場合

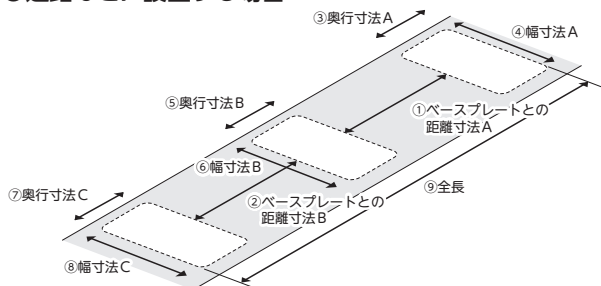

### ●段差に設置する場合

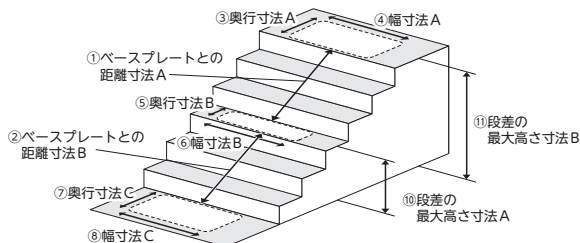


|                  | N-S-Nタイプ                                                                                                                               | S2-Nタイプ                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①ベースプレートとの距離寸法 A | (E1600) 40～55cm目安<br>(E1850/E2100) 55～80cm目安<br>(E2200/E2450/E2800) 80～115cm目安                                                         | (E1600) 40～55cm目安<br>(E1850/E2100) 55～80cm目安<br>(E2200/E2450/E2800) 80～115cm目安                                                         |
| ②ベースプレートとの距離寸法 B | (E1600/E1850/E2200) 40～55cm目安<br>(E2100/E2450) 55～80cm目安<br>(E2800) 80～115cm目安                                                         | (E1600/E1850/E2200) 35～50cm目安<br>(E2100/E2450) 50～75cm目安<br>(E2800) 75～110cm目安                                                         |
| ③奥行寸法 A          | 45cm以上                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| ④幅寸法 A           | 80cm以上                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| ⑤奥行寸法 B          | 30cm以上                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| ⑥幅寸法 B           | 94cm以上                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| ⑦奥行寸法 C          | 45cm以上                                                                                                                                 | 30cm以上                                                                                                                                 |
| ⑧幅寸法 C           | 80cm以上                                                                                                                                 | 94cm以上                                                                                                                                 |
| ⑨全長              | (E1600) 200～230cm以上<br>(E1850) 215～255cm以上<br>(E2200) 240～290cm以上<br>(E2100) 230～280cm以上<br>(E2450) 255～315cm以上<br>(E2800) 280～350cm以上 | (E1600) 180～210cm以上<br>(E1850) 195～235cm以上<br>(E2200) 220～270cm以上<br>(E2100) 210～260cm以上<br>(E2450) 235～295cm以上<br>(E2800) 260～330cm以上 |
| ⑩段差の最大高さ寸法 A     | (下方にE800手すりを使用する場合)<br>(下方にE1050手すりを使用する場合)<br>(下方にE1400手すりを使用する場合)                                                                    | 30cm以下<br>45cm以下<br>60cm以下                                                                                                             |
| ⑪段差の最大高さ寸法 B     | (E1600) 60cm以下<br>(E1850) 75cm以下<br>(E2200/E2100) 90cm以下<br>(E2450) 105cm以下<br>(E2800) 120cm以下                                         |                                                                                                                                        |

※両側手すり(E000T)の場合も同様


※S2-Nタイプは、③、④と⑦、⑧の位置が逆でも可

## N-S2-Nタイプ

### ●通路などに設置する場合

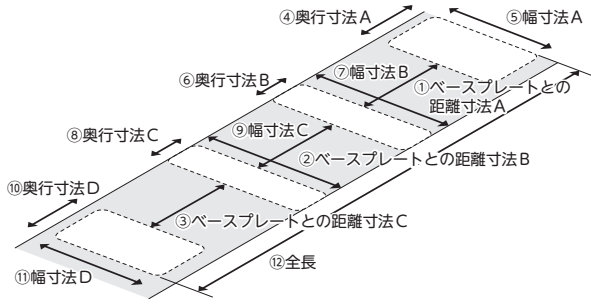


### ●段差に設置する場合

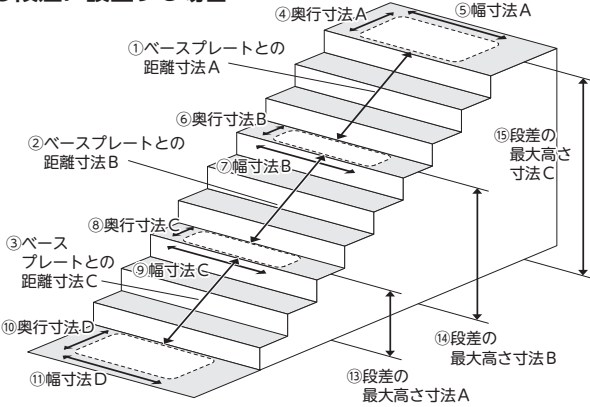


|                  | N-S2-Nタイプ                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① ベースプレートとの距離寸法A | (E2400)<br>(E2650/E2900/E3150)<br>(E3000/E3250/E3600/E3500/E3850/E4200)                                                                                   | 40～55cm目安<br>55～80cm目安<br>80～115cm目安                                                                                                                                                                                               |
| ② ベースプレートとの距離寸法B | (E2400/E2650/E3000)<br>(E2900/E3250/E3150/E3500)<br>(E3600/E3850/E4200)                                                                                   | 35～50cm目安<br>50～75cm目安<br>75～110cm目安                                                                                                                                                                                               |
| ③ ベースプレートとの距離寸法C | (E2400/E2650/E3000/E2900/E3250/E3600)<br>(E3150/E3500/E3850)<br>(E4200)                                                                                   | 40～55cm目安<br>55～80cm目安<br>80～115cm目安                                                                                                                                                                                               |
| ④⑩ 奥行寸法A、D       |                                                                                                                                                           | 45cm以上                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑤⑪ 幅寸法A、D        |                                                                                                                                                           | 80cm以上                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥⑧ 奥行寸法B、C       |                                                                                                                                                           | 30cm以上                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑦⑨ 幅寸法B、C        |                                                                                                                                                           | 94cm以上                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑫ 全長             |                                                                                                                                                           | (E2400) 265～310cm以上<br>(E2650) 280～335cm以上<br>(E3000) 305～370cm以上<br>(E2900) 295～360cm以上<br>(E3250) 320～395cm以上<br>(E3600) 345～430cm以上<br>(E3150) 310～385cm以上<br>(E3500) 335～420cm以上<br>(E3850) 360～455cm以上<br>(E4200) 385～490cm以上 |
| ⑬ 段差の最大高さ寸法A     | (下方にE800手すりを使用する場合)<br>(下方にE1050手すりを使用する場合)<br>(下方にE1400手すりを使用する場合)                                                                                       | 30cm以下<br>45cm以下<br>60cm以下                                                                                                                                                                                                         |
| ⑭ 段差の最大高さ寸法B     | (下方にE800手すりを2本使用する場合)<br>(下方にE800手すりとE1050手すりを各1本使用する場合)<br>(下方にE800手すりとE1400手すりを各1本使用する場合)<br>(下方にE1050手すりを2本使用する場合)<br>(下方にE1050手すりとE1400手すりを各1本使用する場合) | 60cm以下<br>75cm以下<br>90cm以下<br>90cm以下<br>105cm以下<br>120cm以下                                                                                                                                                                         |
| ⑮ 段差の最大高さ寸法C     | (E2400)<br>(E2650)<br>(E3000/E2900)<br>(E3250/E3150)<br>(E3600/E3500)<br>(E3850)<br>(E4200)                                                               | 90cm以下<br>105cm以下<br>120cm以下<br>135cm以下<br>150cm以下<br>165cm以下<br>180cm以下                                                                                                                                                           |

※両側手すり(EOOO T)の場合も同様


・手すりの左右角度は270°以内に納まるように設置してください。

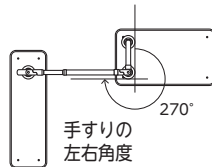

・手すりの上下角度は45°以内に納まるように設置してください。

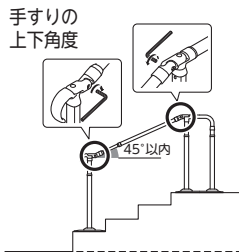


・手すりは、手すり角度を調節した後、上下回転固定ボルトを固定してから使用してください。

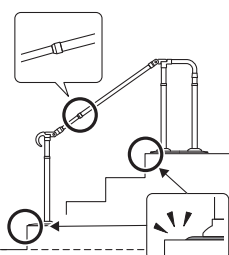


・上下に角度をつける際は、手すり(内) (細い方) が下側になるように設置してください。

・段差のある箇所に設置するときは、ベースプレート端部が段鼻よりも内側になるように設置してください。


ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、芝生、滑りやすい床面の上には設置できません

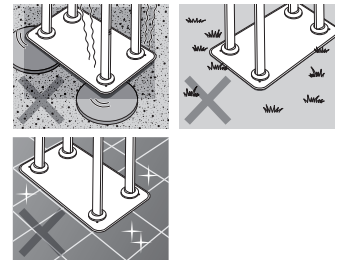


各ベースプレートの端に支柱を固定するときは、各ベースプレートの上に手すりを沿わせて設置しないこと

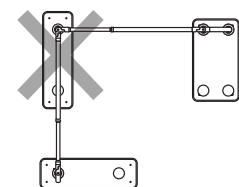


端部にベースプレートSを使用するときは、手すりから45°を超える角度で設置しないこと

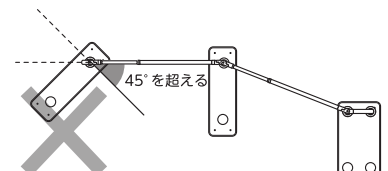


## 240

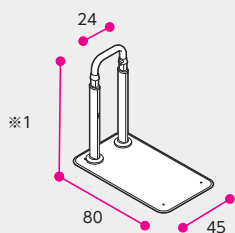


## N2タイプ

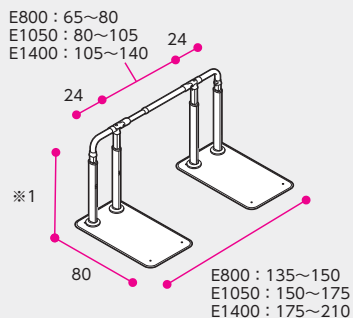


## S-Nタイプ

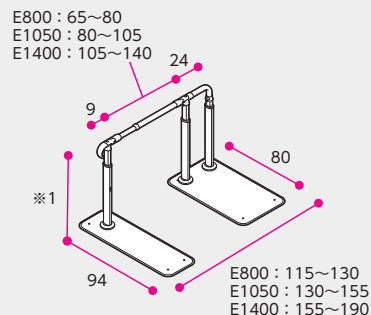


## N-S-Nタイプ

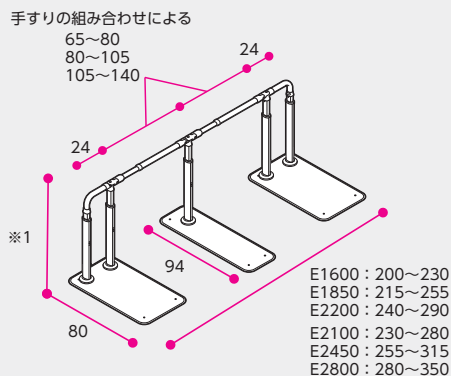

## S2-Nタイプ

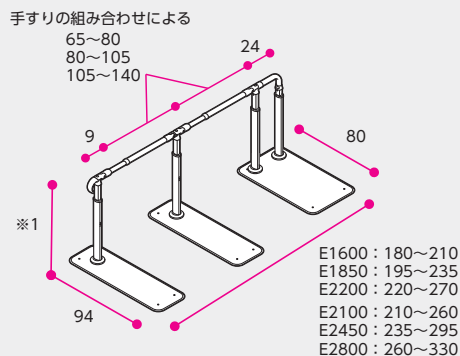


## N-S2-Nタイプ

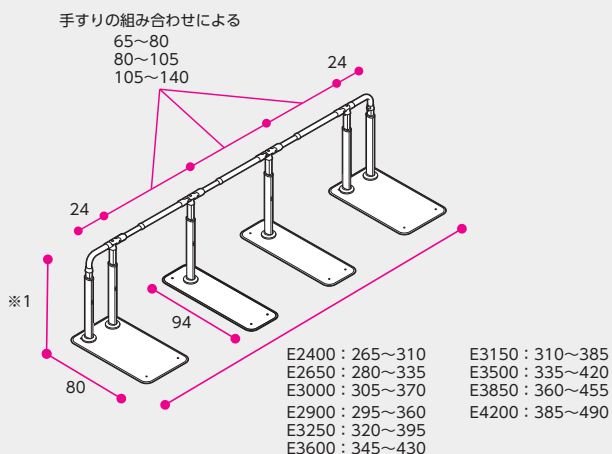

## 共通

※1 手すり高さ75・77.5・80・82.5・85・87.5・90  
(7段階 2.5cm間隔)

※2 両側手すりの有効幅:55

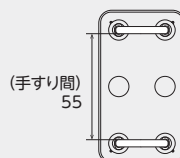

※3 ベースプレートの厚み:1.3

※4 伸縮手すり部 細手すり:3.5×2.6／太手すり:4×3.2

※上記とは異なる組み合わせでのご利用は禁止しております。

# アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



Instagram



YouTube



X



- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■ お問い合わせは…